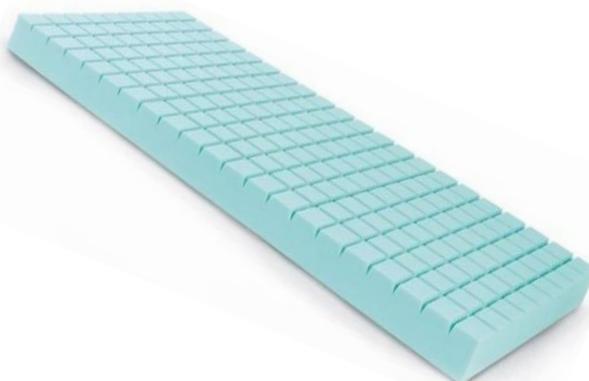


**MATERASSO VENTILATO IN POLIURETANO  
ESPANSO RITARDANTE DI FIAMMA INTERO  
(cod. F2110IGN/I)****Nome Prodotto**

MATERASSO VENTILATO IN POLIURETANO  
ESPANSO RITARDANTE DI FIAMMA INTERO  
(cod. F2110IGN/I)

REF	Misure (cm)
F2110IGN/I	195 x 85 x 14 (± 3%)

**Destinazione d'Uso**

Indicato per prevenire i problemi che possono insorgere dopo una lunga permanenza a letto, grazie al materiale con cui è realizzato che permette una ventilazione continua. Con medio/basso rischio antidecubito.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Poliuretano elastico indeformabile. Densità 30 kg/m<sup>3</sup>. Colore verde. Non contiene lattice.

Altre caratteristiche:

Resistenza a compressione 40%	3,7 kpa
Indentazione 25%	N 110
Indentazione 40%	N 140
Indentazione 65%	N 280
Resa elastica	44%
Carico di rottura	100 kpa
Fatica dinamica	30%
Deformazione permanente 50%	3%
Deformazione permanente 75%	4%
Certificati di Resistenza al Fuoco	MVSS Motor Vehicle Safety STD 302 Californian Technical Bulletin 117 Sez.A e D UNI ISO 3795 Airbus ATS 1000.001 (solo per Verde/ only for Green) FAR 25853 Arrêtè du Août 1991 Classment M4 UNI 9175 (classe 1IM)



Dispositivo Non Sterile

**Istruzioni per l'Uso**

Utilizzare come un normale materasso in pazienti affetti da piaghe da decubito.

**MATERASSO VENTILATO IN POLIURETANO  
ESPANSO RITARDANTE DI FIAMMA INTERO  
(cod. F2110IGN/I)**

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non indicata dal personale medico.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di pulizia. Non lavare direttamente il materasso. Pulire con un panno imbevuto d'acqua, tenere lontano da fonti di calore e da radiazioni solari.



Non Lavare



Non candeggiare



Non asciugare in  
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

**Conservazione**



Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre pulito prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciate, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Il materasso col tempo può assumere un colore che vira al giallo o verde scuro dovuto all'eventuale contatto con la luce. Questo non inficia sulle proprietà e caratteristiche fisico-meccaniche del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Imballo di cartone.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scatola → Raccolta Carta

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa e Brochure → Raccolta Carta

Materasso → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: Y033306

Codice EMDN: V080702

Codice BD/RDM: 2222427



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:  
e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902